



シナツシン補助具

ラクラクッション



AC-210/AC-410/AC-510用 取扱ガイド

ご確認ください

ラクラクッション - 表面



裏面



ポンプ




色・仕様が写真と異なる場合があります

- 1** 空気注入口のふたをとり、ポンプでシワが残る程度に膨らませます。空気の入れすぎに注意しましょう。



- 2** 空気が入ったら、空気注入口のふたをして、中に押し込みます。

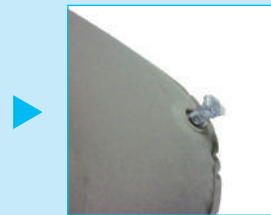

- 3** 裏面のカバーを開くと、上面オレンジ部分に固定ブロックがあります。



※マジックテープは両手で開閉してください。マジックテープの根元が裂ける場合があります。

- 4** 表面の穴からバイブレータの針セット部分が出るように押し込みます。



針固定ビスが表面の穴から出るようにします。

- 5** カバーを留めます。これでセット完了です。



この商品は消耗品です。無理な力での使用は注意してください。
メーカー（製造元）にて初期不良と確認できた場合に限り、交換での対応とさせていただきます。
ご購入後、2週間以内に不具合がありましたら、シナツシンサービスセンターまで、お問い合わせください。

[製造販売元]

あなたと健康を。
KONOKO コノコ医療電機株式会社 ISO13485 認証取得
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20 KSBビル6F

シナツシン サービスセンター

フリーダイヤル **0120-800-515**

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日は休み)
ホームページ www.konoko.co.jp

ABF10-00011 [2008 1K]



シンアツシン補助具

ラクラクッション



AC-200/AC-600 用 取扱ガイド

ご確認ください

ラクラクッション - 表面



裏面



ポンプ





色・仕様が写真と異なる場合があります

- 1** 空気注入口のふたをとり、
ポンプでシワが残る程度に
膨らませます。
空気の入れすぎに注意しましょう。



- 2** 空気が入ったら、
空気注入口のふたをして、
中に押し込みます。

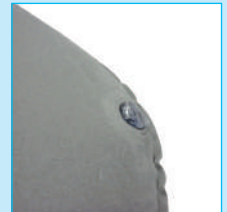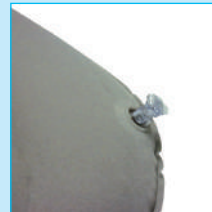

- 3** 裏面のカバーを開くと、
上面オレンジ部分に
固定ブロックがあります。
その固定ブロックを取り外します。



- 4** 固定ブロックを
底面オレンジ部分に
取り付けます。



※マジックテープは両手で開閉してください。
マジックテープの根元が裂ける場合があります。

- 5** 表面の穴から
バイブレータの針セット部分
が出るように押し込みます。



針固定ビスが表面の穴から
出るようにします。

- 6** カバーを留めます。
これでセット完了です。

